

Instrucción de herraje cast

- Consejos útiles para la aplicación de los Ganchos Cast -

¿Cuándo se usan los Ganchos Cast?

Se usan los ganchos cast en caso de diferentes diagnoses, por ejemplo cuando el estuche córneo necesita descanso y estabilidad y cuando no se puede clavar una protección de casco.

La aplicación de una herradura «cast» requiere experiencia especializada. Para evitar posibles secuelas de la inmovilización, es importante el momento adecuado de la removilización. El mecanismo del casco y el sistema musculoesquelético del caballo suelen trabajar juntos de manera perfecta. Entonces, si se inmovilizan partes individuales, esto puede llevar a una carga incorrecta de otras áreas. La decisión final de utilizar o no un herraje «cast» siempre debe ser tomada por el herrador capacitado en el lugar, posiblemente en cooperación con el veterinario.




¿Qué ventajas ofrece este sistema?

- Permite al herrador fijar la herradura sin clavar ni pegar.
- Durante el herraje, el casco (que está sensible y quizás doloroso) no está trepidado por los martillazos.
- El mayor beneficio de nuestro sistema cast es que el lado inferior de la herradura no está cubierto por la venda sintética, lo que naturalmente prolonga la durabilidad del herraje «cast».

Barra Cast

- Una barra cast tiene 9 ganchos cast.
- Necesita 6 ganchos cast para fijar una herradura Duplo.

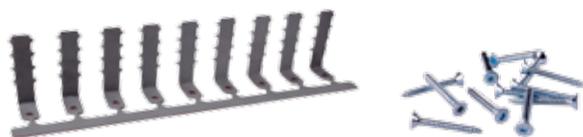

Tornillos

- Recomendamos los tornillos siguientes para fijar los ganchos cast en la herradura Duplo: DIN 7982 / ISO 7050 tornillos autorroscantes de cabeza plana 4,2 mm x 19 mm
- Necesita 6 tornillos para fijar los ganchos cast en la herradura Duplo.
- En nuestra tienda en línea puede pedir los tornillos adecuados en un juego con la barra cast.



Cinta sintética (cast)

- La venda para inmovilización (fibra de vidrio) se endurece bajo la influencia del agua. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el embalaje - tan pronto como la cinta se expone al aire, puede endurecerse debido a la humedad del aire.
- Hay dos tallas disponibles en nuestra tienda en línea: 5cm x 3,6m y 7,5cm x 3,6m
- Por lo general, se necesita un rollo de venda sintética de fibra de vidrio por casco.

Herraduras adecuadas para el sistema

Se puede combinar los ganchos cast con cada herradura compuesta Duplo - también con los modelos con pinza abierta. Este sistema puede ser particularmente útil para los caballos que sufren de laminitis, por ejemplo. No recomendamos utilizarlo en combinación con un herraje de poliuretano, ya que el tornillo no encajará firmemente sin un núcleo metálico.

Aspectos importantes según la talla de la herradura

Los ganchos cast actualmente disponibles están diseñados para todas las herraduras de pinza abierta; para los modelos regulares, todavía son necesarios ajustes manuales a partir de la talla 142mm.

Más información e instrucciones de seguridad:

www.duplo-frank.de/es/herraje

www.duplo-frank.de/es/seguridad



<https://youtu.be/MIIdNQ-yOzdU>




(1) Preparación

- La preparación del casco funciona de la misma manera como antes cualquier otro herraje y debe ser efectuada profesionalmente.
- Elija la herradura que pega bien con el casco (tally / forma), la temperatura (Standard / Extra) y el uso previsto (modelo).
- Ajuste esta herradura exactamente a la forma del casco con una amoladora angular o de banda
- Quitá todos los tetones. Esto también se aplica a los tetones blandos del modelo «Nailless».

(2) Fijación de los ganchos cast en la herradura

- Coloque el tornillo en una clavera del lado del casco de la herradura. Inserte el gancho cast en el tornillo del lado del suelo de la herradura.
- Atornille el tornillo con el destornillador eléctrico hasta que el tornillo sea avellanado en el material sintético de la herradura en la zona de la pared.
- Corte los partes sobresalientes de los tornillos con una amoladora angular o de banda. Tenga en cuenta las precauciones de seguridad adecuadas y considere que puede haber chispas.

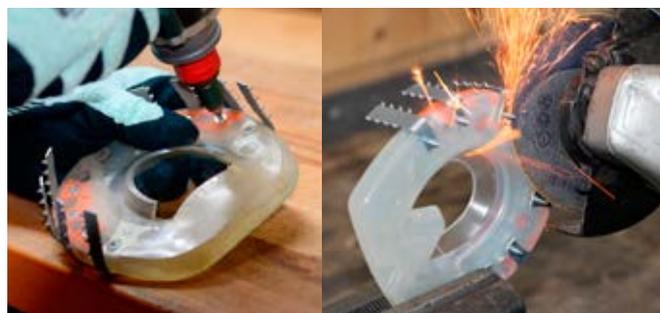

(3) Fijación de la herradura «cast» en el casco

- Cuando todos los ganchos estén fijados en la herradura, póngalos bajo tensión y coloque la herradura en el casco. Con una aplicación correcta, la herradura «cast» ahora permanecerá en la posición correcta en el casco por sí mismo.
- Cuando la herradura tiene la posición ideal en el casco, puede empezar a envolver el casco con la cinta sintética. Tenga en cuenta las instrucciones de uso de la cinta. Asegúrese de usar guantes y de que el casco esté limpio y seco.
- No hay que la banda coronaria y los pulpejos sean cubiertos de la cinta. Baje el casco y deje que la cinta sintética se endurece completamente.



(4) Remover la herradura «cast» del casco

Utilice un cúter con hoja en gancho y asegúrese de seguir las normas de seguridad habituales para el cúter. Desaconsejamos el uso de un cúter normal, ya que podría provocar lesiones. Corte cuidadosamente la venda sintética en la area de la pinza, de arriba abajo. Ahora debería ser posible quitar el herraje fácilmente. Para ello, extiende la venda sintética.



Por favor, observe las instrucciones de seguridad aplicables a nuestros productos. Puede encontrar más detalles sobre nuestros ganchos cast en línea en: www.duplo-frank.de/es/sin-clavos/ganchos-cast



Si tiene alguna pregunta o desafío individual, ¡nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarle!

Herraduras Compuestas Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
94143 Grainet, Germania

Tel.: +49 (0) 8585/96926-0
Fax: +49 (0) 8585/96926-119

 [duplo_composite_horseshoes](https://www.instagram.com/duplo_composite_horseshoes)

 Duplo Composite Horseshoes

 info@duplo-frank.de



www.duplo-frank.de



Última modificación: Junio 2024