

Le sabot en plâtre

- Informations importantes pour l'application des crochets résine -

Quand utilise-t-on les Crochets Résine ?

Nous recommandons l'application des crochets résine Duplo en cas de certaines diagnoses – si la capsule du sabot doit être stabilisée et immobilisée, par exemple, et si on ne peut pas clouer la protection de sabot.

L'utilisation d'un fer à cheval « cast » nécessite des connaissances spécialisées. Pour éviter les éventuels dommages consécutifs à une immobilisation, il est important de choisir le bon moment pour la remobilisation. En règle générale, le mécanisme du sabot et l'appareil locomoteur du cheval fonctionnent parfaitement ensemble. Toutefois, si certaines parties sont désactivées, cela peut entraîner une mauvaise sollicitation d'autres zones. La décision finale pour ou contre un ferrage « cast » doit toujours être prise sur place par le maréchal-ferrant qualifié, le cas échéant en coopération avec le vétérinaire.




Les avantages des crochets résine

- Le système permet de fixer une ferrure sans clou ni colle.
- Pendant le ferrage, le sabot (qui est peut-être sensible et endolori) n'est pas troublé par des vibrations des coups de marteau.
- Le principal avantage est que le côté inférieur du fer n'est pas recouvert par le bandage résine, ce qui prolonge naturellement la durée de vie du bandage de plâtre.

La barre résine

- Une barre résine se compose de 9 crochets.
- On nécessite 6 crochets pour fixer une ferrure Duplo.

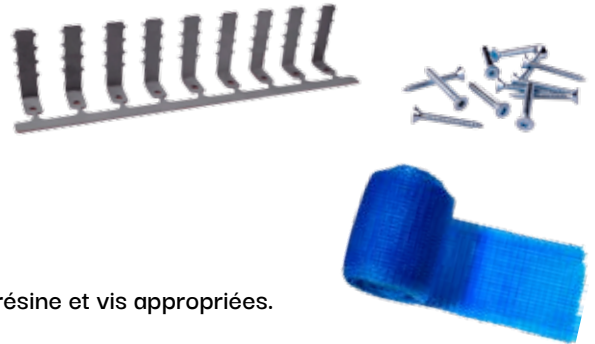

Les vis

- Nous recommandons les vis suivantes :
DIN 7982 / ISO 7050 vis à tôle à tête fraisée 4,2mm x 19mm
- On nécessite 6 vis pour fixer les crochets résine à une ferrure Duplo.
- Dans notre boutique en ligne, vous trouverez la combinaison de barre résine et vis appropriées.

Cast-Bandage

- La bande de résine (fibre de verre) durcit sous influence d'eau. Veillez à ne pas abîmer l'emballage ; dès que le bandage résine est entouré d'air, il commencera à durcir à cause de l'humidité d'air.
- Dans notre boutique en ligne, il y a deux tailles : 5cm x 3,6m et 7,5cm x 3,6m
- En règle générale, vous avez besoin d'un rouleau de bandage de soutien en fibres de verre synthétique par sabot.

Fers à cheval adaptés au système Cast

Toutes les ferrures composites Duplo peuvent être combinées avec des crochets résine – même les modèles avec la pince ouverte. Cela peut être d'un grand secours pour les chevaux de fourbure. Nous déconseillons de l'utiliser en combinaison avec une ferrure purement synthétique, car sans noyau métallique, la vis n'est pas bien fixée.

Aspects importants selon la taille du fer à cheval

Les crochets résine actuellement disponibles sont parfaitement adaptés à tous les modèles avec pince ouverte ; pour les modèles réguliers, des adaptations manuelles sont actuellement nécessaires à partir de la taille 142mm.



Weitere Informationen und Sicherheitshinweise:
www.duplo-frank.de/fr/instruction-de-ferrage
www.duplo-frank.de /fr/securite

<https://youtu.be/3bu8RcEOeTI>



(1) Préparation

- La **préparation du sabot** est la même qu'avant quelconque autre ferrage et doit être effectuée de façon professionnelle.
- Choisissez la ferrure appropriée pour le sabot (forme et taille), la température (Standard ou Extra) et l'utilisation envisagée du cheval (modèle).
- Ajuster la **ferrure** exactement à la forme du sabot.
- Nous vous recommandons d'enlever tous les nodules.
Cela vaut également pour les nodules souples du modèle Nailless.

(2) Fixation des crochets résine au fer à cheval

- Introduisez la vis dans un trou de clou du fer à partir du côté sabot et placez ensuite le crochet résine sur la vis à partir du côté sol du fer à cheval.
- Serrez la vis avec la visseuse sans fil jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée dans la zone de la paroi.
- Poncez les vis qui dépassent avec la meuleuse d'angle. Veillez à prendre les mesures de sécurité appropriées et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des étincelles.



(3) Fixation de la ferrure « cast » au sabot

- Lorsque tous les crochets résine sont fixés au fer à cheval, mettez-les en tension et placez le fer « cast » sur le sabot. S'il est utilisé correctement, le fer reste déjà de lui-même dans la bonne position sur le sabot.
- Une fois que le fer à cheval a atteint la position optimale sur le sabot, vous pouvez envelopper le sabot avec le bandage résine. Veuillez prendre en compte les instructions d'utilisation du bandage. Portez des gants et veillez à ce que le sabot soit propre et sec.
- Le bord coronal et les bulbes des talons ne doivent pas être couverts ! Posez le sabot et laissez le plâtre durcir complètement.



(4) Enlever le fer « cast »

Utilisez un cutter avec une lame à crochet et respectez les consignes de sécurité habituelles pour le cutter. Nous déconseillons l'utilisation d'un cutter ordinaire, car il pourrait entraîner des blessures. Coupez soigneusement le bandage résine au niveau de la pince, du haut vers le bas. Il devrait maintenant être possible d'enlever facilement la ferrure. Pour ce faire, écarter le bandage de plâtre.



Veuillez prendre en compte les consignes de sécurité applicables à nos produits. Pour plus de détails sur nos crochets résine, veuillez consulter notre site web : www.duplo-frank.de/fr/sans-clous/crochets-resine



Notre équipe du service clientèle se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider à relever vos défis individuels !

Ferrures composites Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
94143 Grainet, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 8585/96926-0
Télécopie : +49 (0) 8585/96926-119

 [duplo_composite_horseshoes](https://www.instagram.com/duplo_composite_horseshoes)

 Duplo Composite Horseshoes

 info@duplo-frank.de

 www.duplo-frank.de



Mise à jour : juin 2024