

Comme ferrure composite, la ferrure Duplo combine deux matériaux différents - métallique et synthétique - et leurs nombreux avantages pour le sabot. Jugez par vous-même !



Insert métallique solide


Grâce à son insert métallique solide, la ferrure Duplo est presque indéformable et très résistante à la torsion. Ce fait contribue à la durabilité de la ferrure ; de plus, on évite ainsi la pression indésirable sur la sole.

Étampures fiables

Les étampures sont intégrées dans l'insert métallique. Ainsi, on veille à ce que la tête du clou ne puisse pas passer par l'étampure. De plus, les clous seront bien fixés lors des mouvements irréguliers. Les étampures sont d'une forme oblongue et à l'angle droit par rapport à la ligne blanche ; ainsi, vous pouvez individuellement placer les clous même si le sabot est d'une forme irrégulière.

Couche synthétique amortissante

La couche synthétique est faite d'un matériau relativement souple et diminue les chocs et les vibrations de haute fréquence présents lors du poser du sabot. Le cheval en profite par une sensation de confort pendant ses mouvements.

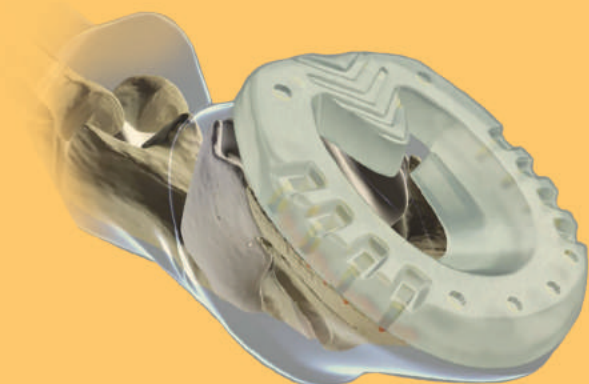

Risque minimal de blessures

Le matériau plus souple et les bords arrondis de la ferrure Duplo diminuent le risque de blessures en troupeau ou lors de mouvements irréguliers en comparaison avec une protection de sabot conventionnelle ou avec un sabot nu à angles vifs.

Protection du sol

Quand vous utilisez une ferrure Duplo régulière sans Spikes ou crampons, il n'y a aucun contact entre métal et sol parce que les têtes des clous sont chassées dans le matériau synthétique. Les terrains sensibles (par exemple l'asphalte ou le pavement hollandais historique) ne seront presque pas endommagés par la ferrure Duplo.

Protection antidérapante quasi-naturelle

Le comportement de glissement de la ferrure Duplo correspond à celui d'un sabot non ferré, ce qui est plus naturel que la phase de glissement prolongée d'un fer à cheval conventionnel.




Application orthopédique et thérapeutique

La ferrure Duplo est idéale pour les sabots problématiques. Vous pouvez l'appliquer en cas de maintes diagnoses. Si votre cheval souffre de pourriture de la fourchette, par exemple, la ferrure Duplo peut encourager une guérison rapide et permanente. De plus, une ferrure Duplo régulière est moins lourde qu'un fer à cheval conventionnel avec les accessoires additionnels correspondants (planche sous les talons + semelle amortissante + semelle anti-neige). Le poids réduit protège l'appareil locomoteur et la paroi.

Stimulation du mécanisme du sabot

Le matériau synthétique flexible encourage la mobilité des structures élastiques du sabot. De plus, la barre sous les talons stimule la circulation du sang dans la fourchette. La ferrure Duplo anime la fonction naturelle du mécanisme du sabot.

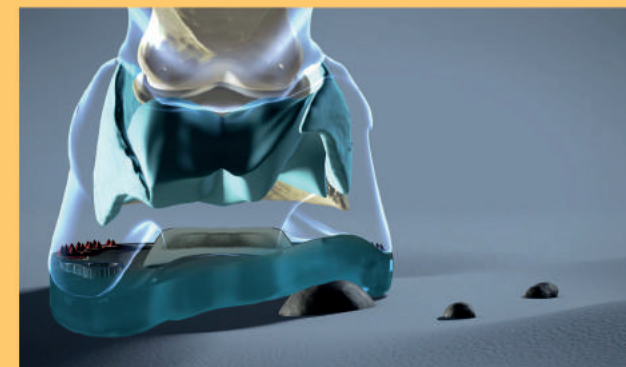



Application facile

L'application correcte de la ferrure Duplo est facile si votre maréchal-ferrant a les connaissances et l'aptitude nécessaires pour clouer et riveter une ferrure et en considérant certains aspects en le faisant. On peut utiliser les outils et les clous à ferrer traditionnels.

Modifications individuelles

Avec de nombreuses modifications, on peut ajuster la ferrure Duplo individuellement à la forme du sabot et aux besoins du cheval. Votre maréchal-ferrant peut aussi tout simplement meuler ou courber un relevé de pince qui facilite le décollage du sabot.

Longue durée de vie

La bonne résistance à l'usure des matériaux utilisés limite l'abrasion même lors d'utilisation intensive. Dans certaines circonstances, vous pouvez même utiliser une seule ferrure Duplo plus d'une fois.



Large gamme de tailles

Grâce à la large gamme de tailles, même les chevaux très petits et très grands profitent des ferrures Duplo.

Rapport qualité/prix raisonnable

Une ferrure Duplo coûte moins qu'un fer à cheval conventionnel avec les accessoires additionnels correspondants (planche sous les talons + semelle amortissante + semelle anti-neige). Ainsi, la ferrure Duplo est une vraie alternative même sur le plan économique !



www.duplo-frank.de

Ferrures Composites Duplo

H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Tel.: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-119
E-Mail : info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege



Latest Update: 01/2023

FR

DUPLO

Ferrure Composite

