


## Wann benutzt man die Duplo Cast-Haken?

Die Cast-Haken werden bei bestimmten Diagnosen eingesetzt, etwa wenn die Hornkapsel absolut ruhiggestellt und stabilisiert werden soll und kein genagelter Hufschutz angebracht werden kann.

## Was ist der Vorteil des Systems?

Während des Beschlagens wird der (empfindliche und möglicherweise schmerzende) Huf nicht durch Hammerschläge erschüttert. Während der Nutzung liegt die Cast-Binde nicht auf der Bodenfläche des Duplo-Beschlags auf und wird somit nicht durchgelaufen.

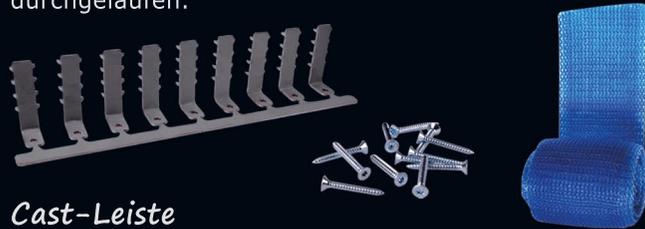

### Cast-Leiste

- Eine Cast-Leiste besteht aus 9 Cast-Haken.
- Zum Befestigen eines Duplo-Beschlags benötigen Sie 6 Cast-Haken.

### Schrauben

- Wir empfehlen die folgenden Schrauben zur Befestigung der Cast-Haken am Duplo-Beschlag: DIN 7982 / ISO 7050 Senkkopf-Blechschräuben 4,2mm x 19mm
- Zum Befestigen der Cast-Haken an einem Duplo-Beschlag benötigen Sie 6 Schrauben.
- In unserem Online-Shop finden Sie die passenden Schrauben in Kombination mit der Cast-Leiste.

### Cast-Bandage

- Der HS-Stützverband (Glasfaser) härtet unter Wassereinfluss aus. Achten Sie deshalb darauf, die Verpackung nicht zu beschädigen - sobald die Cast-Bandage der Luft ausgesetzt wird, kann sie durch die Luftfeuchtigkeit aushärten.
- In unserem Online-Shop finden Sie zwei Größen: 5cm x 3,6m und 7,5cm x 3,6m

**Achtung:** Die Schrauben und die Cast-Bandage aus unserem Online-Shop sind nur innerhalb der EU erhältlich!

## Vorbereitung des Hufs

Die Vorbereitung des Barhufs funktioniert grundsätzlich genauso wie vor jedem anderen Beschlag auch und muss fachgerecht durchgeführt werden.

## Vorbereitung des Duplo-Beschlags

- Wählen Sie den Duplo-Beschlag aus, der am besten zur Hufgröße, zur Hufform und zum Anwendungszweck passt.
- Passen Sie diesen Beschlag mit einem Winkel- oder Bandschleifer an die Hufform an.
- Um einen optimalen Formschluss zu erzielen, können die Noppen entfernt werden.

Weitere Informationen und Sicherheitshinweise:  
[www.duplo-frank.de/de/beschlagsanleitung](http://www.duplo-frank.de/de/beschlagsanleitung)  
[www.duplo-frank.de/de/sicherheit](http://www.duplo-frank.de/de/sicherheit)


### Tip:

Die Cast-Haken lassen sich mit fast jedem Duplo-Beschlag sinnvoll kombinieren - auch mit den zehenoffenen Modellen. Gerade bei Pferden, die etwa an Hufrehe erkrankt sind, kann dieses System helfen.



## Befestigung der Cast-Haken am Beschlag

- Stecken Sie die Schraube von der Hufseite her in ein Nagelloch des Duplo-Beschlags.
- Stecken Sie den Cast-Haken von der Bodenseite des Beschlags her auf die Schraube.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem Akkuschräuber fest, bis sie im Tragrand-Bereich versenkt ist.
- Schleifen Sie die überstehenden Schrauben mit

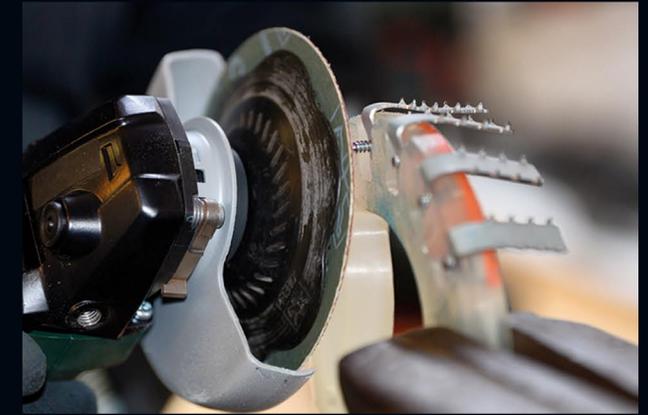

## Befestigung des Beschlags am Huf

- Damit das Pferd einen sicheren Stand hat, lassen Sie den gegenüberliegenden Huf von einer zweiten Person aufheben.
- Wenn alle Haken am Beschlag fixiert sind, bringen Sie diese auf Vorspannung und platzieren den Duplo-Beschlag am Huf.
- Wenn der Duplo-Beschlag die optimale Position am Huf hat, können Sie den Huf mit der Cast-Bandage umwickeln.
- Stellen Sie den Huf ab und lassen Sie den Cast vollständig aushärten.






**Achtung:** Das Saumband und der Ballenbereich müssen frei bleiben!



**Achtung:** In Kombination mit den regulären runden bzw. ovalen Duplo-Beschlägen können die Cast-Haken derzeit nur bis zur Größe 142mm verwendet werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung für größere Beschläge. Bei den zehenoffenen Modellen tritt dieses Problem nicht auf.

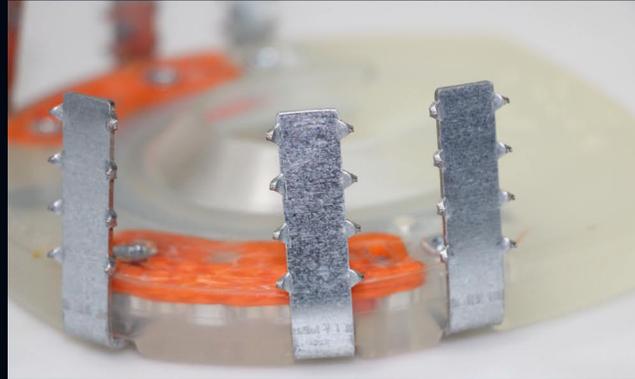

[www.duplo-frank.de](http://www.duplo-frank.de)

**Duplo Verbundbeschläge**

H. Frank Kunststofftechnik GmbH  
Vorderfreundorfer Straße 20  
D-94143 Grainet

Tel.: +49 (0)8585 96926-0  
Fax: +49 (0)8585 96926-119  
E-Mail: [info@duplo-frank.de](mailto:info@duplo-frank.de)

[www.duplo-frank.de](http://www.duplo-frank.de)  
[www.duplo-innovations.com](http://www.duplo-innovations.com)

[www.facebook.com/duplo.frank](https://www.facebook.com/duplo.frank)  
[www.instagram.com/duplo\\_verbundbeschlaege](https://www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege)



Letzte Aktualisierung: 02/2021

DE

# DUPLO

## Cast-Haken

