

Comme ferrure composite, la ferrure Duplo combine deux matériaux différents - métallique et synthétique - et leurs nombreux avantages pour le sabot. Jugez par vous-même !

Insert métallique solide

Grâce à son insert métallique solide, la ferrure Duplo est presque indéformable et très résistante à la torsion. Ce fait contribue à sa durabilité ; de plus, on évite ainsi la pression indésirable sur la sole.

Étampures fiables

Les étampures sont intégrées dans l'insert métallique. Ainsi, on veille à ce que la tête du clou ne puisse pas passer par l'étampure. De plus, les clous seront bien fixés même lors des mouvements irréguliers. Les étampures sont d'une forme oblongue et à l'angle droit par rapport à la ligne blanche ; ainsi, vous pouvez individuellement placer les clous même si le sabot est d'une forme irrégulière.




Couche synthétique amortissante

La couche synthétique est faite d'un matériau relativement souple et diminue les chocs et les vibrations de haute fréquence présents lors du poser du sabot. Le cheval en profite par une sensation de confort pendant ses mouvements.

Stimulation du mécanisme du sabot

La flexibilité du matériau synthétique encourage les mouvements élastiques naturels du sabot dans l'axe horizontal et vertical.

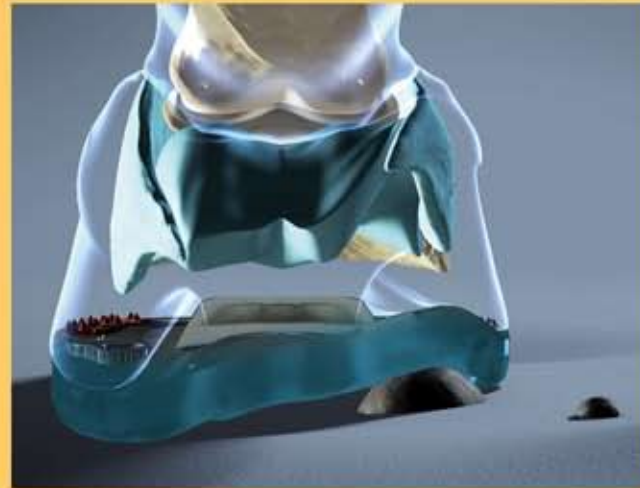

Protection antidérapante quasi-naturelle

Le comportement de glissement de la ferrure Duplo correspond assez bien à celui d'un sabot non ferré, ce qui est beaucoup plus naturel que la phase de glissement prolongée d'un fer à cheval conventionnel métallique.

Décollage plus facile

Vous pouvez tout simplement meuler ou courber une ferrure Duplo pour créer un relevé de pince qui facilite le décollage du sabot.



Risque minimal de blessures

Le matériau plus souple et les bords arrondis diminuent le risque de blessures en troupeau ou lors de problèmes d'allures (par exemple en cas d'un cheval qui se forge).

Ferrure hivernale idéale

La lèvre élastique moulée de quelques modèles Dulo réduit considérablement l'accumulation de neige et de boue dans la ferrure. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des Spikes ou des crampons.

Traitement de problèmes de sabot

La ferrure Duplo aide au rétablissement de la santé du sabot pendant beaucoup de maladies du pied (par exemple en cas de pourriture de la fourchette).

Variantes orthopédiques et thérapeutiques

La ferrure Duplo est idéale pour les sabots problématiques. Vous pouvez l'appliquer en cas de maintes indications thérapeutiques.

Modifications individuelles

Avec de nombreuses modifications, vous pouvez ajuster la ferrure Duplo individuellement à la forme du sabot et aux besoins du cheval.



Fixation solide

Les nodules présents au côté pied s'enfoncent dans la paroi et maintiennent la position de la ferrure. Il y a plusieurs modèles qui sont pourvus de deux pinçons qui contribuent aussi à la bonne fixation de la ferrure.

Longue durée de vie

La bonne résistance à l'usure des matériaux utilisés limite l'abrasion même lors d'utilisation intensive. Dans certaines circonstances, vous pouvez même utiliser une seule ferrure Duplo plus d'une fois.

Protection du sol

Quand vous utilisez une ferrure Duplo régulière sans Spikes ou crampons, il n'y a aucun contact entre métal et sol parce que les têtes des clous sont chassées dans le matériau synthétique. Les terrains sensibles (par exemple du pavement hollandais historique) ne seront pas endommagés par la ferrure Duplo.

Large gamme de tailles

Selon le modèle, la ferrure Duplo est disponible en une vingtaine de tailles entre 98 mm et 170 mm. Ainsi, même les chevaux très petits et très grands profitent des ferrures Duplo.

Application facile

L'application correcte de la ferrure Duplo est facile quand vous avez les connaissances et l'aptitude nécessaires pour clouer et riveter une ferrure et quand vous considérez certains aspects en le faisant. Vous ne nécessitez pas d'équipement additionnel - vous pouvez utiliser les outils et les clous de maréchalerie traditionnels.

Rapport qualité/prix raisonnable

Enfin et surtout, la structure des prix fait de la ferrure Duplo une vraie alternative !


www.duplo-frank.de



Ferrures Composites Duplo
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet
Téléphone : +49 (0)8585 9699982
Télécopie : +49 (0)8585 9699966
info@duplo-frank.de
www.duplo-frank.de
www.facebook.com/duplo.frank

DUPLO

Ferrure Composite

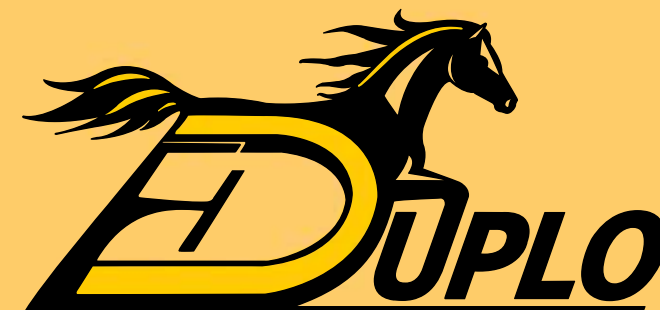

Mise à jour : Février 2018